

## Введение в цифровой Меридиан терапия инструмент

- |   |       |
|---|-------|
| 1. характеристики                               | --    |
| 2. механизмы физической терапии                 | -     |
| 3. функциональные характеристики                | - -   |
| 4. симптомы адаптации                           | -     |
| 5. часть названия "....."                       | ..... |
| 6. Нажмите функции и инструкции по эксплуатации | -     |

## Во-вторых, правильно. с помощью метода

- |  |   |
|--|---|
| 1. Подготовка перед использованием             | - |
| 2. конкретный метод операции                   | - |
| 3. продукт техническое обслуживание и хранение | - |
| 4. продукт обращения                           |   |

## Три графических, традиционная кит.айская медицина

## Иглоукалывание терапия с асирpoint

fV, метод выбора точки физической терапии для распространенных заболеваний профиля

Пять, отобранных для целого ряда заболеваний и физической терапии таблица

Шесть, проблемы и решения

Семь, технические характеристики изделия

Восьмь правила гарантийного, качество продукции и качество гарантийный талон



### 1. характеристики

Цифровые меридиан терапии документа, основанного на физике и биомиметики, биологическое электричество, Меридиан теории традиционной китайской медицины в сочетании с большое количество клинических Практика использования современных микроэлектронных технологий исследования и разработки новых продуктов здравоохранения. Она не только имеет Игло-терапия, ритм, массажа, Массаж, Гуа Ша, веса, кровяного давления и других функций, и с функцией педикюр, оригинальность и развития ИК спектров на комнатной температуре электродов, Терапевтический эффект более глубокие, более глубоких навыков, эффект, даже лучше.

### 2. механизм физической терапии

Мышцы, нервы, органов и тканей человеческого тела клетки будет производить слабая активность и он управляется жизнь в теле биологического Изменения в электронной форме, биоэлектронная движения производит характерной чертой живых организмов биологического электричества. В организме на протяжении всей жизни, являются неотделимы от биоэлектронного спорта, она всегда поддерживала относительный баланс в дисбаланс. С точки зрения Меридиан цепь дисбаланс приведет к расстройств Меридиан, вызывая все виды дискомфорта или боли в теле человека. Цифровой Меридиан терапия инструмент с помощью Хай тек бионических ток низкой частоты цифровой технологии, непосредственно на тело человека, через Меридиан системы для всего тела, таким образом местные и всего тела кондиционирования и лечения. Бионических с токами низкой частоты в человека Тело акупунктурных точек на поверхности тела (или пораженную часть это точка АШИ) может непосредственно стимулирует ингибирование симпатических нервов и кровеносных сосудов, повысить циркуляцию крови, Улучшение кровообращения и питательных веществ. Токи высокой энергии может вызвать эффекты масхн. Через механизм корковых нарушения и ворота Болеутоляющий эффект своевременно, в то же время. через такое морфин подобные вещества в сыворотке обращения может быть пазер—эндорфина содержание увеличивается,



Болеутоляющий эффект привести к устойчивой, высоких энергий хинджи электрического тока стимулирует нервы и мышцы причиной нервных и мышечных сокращение Методы могут облегчить усталость и лечения травмы периферических нервов и паралич,

Оригинальность продуктов с использованием нано инфракрасной технологии развивать на комнатной температуре ИК спектры электрод, Он импульсного воздействия электронов и после прохождения кожи лучистой энергии выбросов высокой энергии красный ФСБ гармокики, дальнейшего ускорения циркуляции, Поощрять обмен веществ, повысить воспалительный отек, покаявание эффект, таким образом регулирующие иммунные функции организма, укрепляет иммунную систему.

### 3. функциональные характеристики

- (1) использование цифровой технологии, физические факторы необходимы в организме и которые точные цифровые сигналы, а затем компьютер согласно потребности для всеобъемлющего Рациональной терапии. обеспечение точности физической терапии, значительно повысить эффективность лечения.
- (2) имеет большой экран LCD, включает в себя физиотерапию, прочность, функции, режим, время, появляется в системе английского, индикаторы человеческого тела Мврдивн
- (3) Электроды с помощью инфракрасного света, площадью более (4) уникальный «иммунной модуляции», для укрепления и координации тела сопротивления, чтобы помочь человеческого тела для улучшения борьбы против патогенов, таких как бактерии, микробы,
- (5) прекрасные волны сочетание дает вам практический опыт Игло-терапия, рнтм, Массаж, баночный, Массаж, Гуа Ша двиствительно чувствовать
- (6) Меридиан ЖК индикаторы направлять лечение. Выберите различные асирpoint терапии на основе симптомов, если вам нужен только массаж. чтобы адрвс *узалосць*. вы можно выбрать точку как асирpoint али боль может быть, это очень удобно.



Цифровой меридиана терапии инструмент это суть китайски ои традиционной медицины успешно сочетается с современной микроэлектронной технологии вместе в идеальное единство, каналы связи и коллатералей, Ци и крови. исцеление 7здоровье, долголетие, главным образом адаптировать следующие аспекты:

- (1) различных острых и хронических простудные заболевания, высокое кровяное давление, низкое кровяное давление, ревматизм, артрит, замороженные поясничной мышцы. плеча, желудка, боли в животе, диспепсия, зубной боли, менструации, импотенция, снижение половой. функции.
- (2) физического дискомфорта, низкий иммунитет, тела усталость, невралгии, низкой боли в спине, плеча, боль в шее, боль в ногах и так далее.
- (3) косметический эффект, похудение, послеродовой брюшной релаксации, удаление акне

5, имя части:

(1) имя основного устройства.

Электрод соединитель

ЖК-экран

**КЛАВИША ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ**

Прочность укрепления ключ

Функциональный переключатель

Английский переключения ключей

Сроки и здоровье

Electrode Socket

Intensity Decrease

Chinese/English button




Обмотки пластика

Батарея

Размещение электродов

Проволока

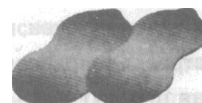

6. Нажмите функцию и инструкции по эксплуатации выходных разъемов. подключение вывода электродов.

2) LCD: интуитивный дисплей родного государства.

3) м... .. включение/выключение ==.иб функции включения/выключения  
4) Китайский/Английский отображение ==.иб функции включения/выключения  
ЖК-дисплей на английском языке

5 j функция select (кнопка mode):

Машина — — — — — основных функций, Иглоукалывание, удар, Ма «аж» — бабочный массаж, гуе Ша, тонкие тела, иммуНизк регулирование. нажатие этой к... .. модели. — — — — — режимов могут быть выбраны в Пятю очередь, петля, власть на инструменте во время иглоукалывание модель автоматически.

6) время сплю: нажать эту кнопку, чтобы увеличить таймера 5 минут, до 15 минутный таймер, часы 15 минут после включения питания на

7) прочность, расширение ключ: увеличение интенсивности лечения, каждый „1юч один раз, увеличить интенсивность блок, максимум 15

8) сила слабеет ключ: уменьшается интенсивность лечения, каждый ключ один раз, сократить численность подразделения, минимальное значение — 0

1. Подготовка перед использованием

Вставка батареек

(2) батареи в 7, соответственно отметить позицию полярности :рышка плотно

Подготовка электрод

(1) защитный лист на поверхности вставить куски аккумуляторно оторвать

2) когда вы закончите, залагай на табличке, обмотки

**Положение электродов**

- (1) сухого или влажным полотенцем будет выступающую часть, удаление жира и пота;
- (2) Вставьте электроды непосредственно в узел физической терапии
- (3) как расположенные на поверхности электродов, в противном случае это невозможно, поместите электродов не имеют симметричные;

**2. конкретный метод оптимизации**

- (1) включите питание: нажмите на ключ к ЖК-экран включен, в то время как режим физической терапии указывает, что стрелка направлена в модели акупунктуры, интенсивность 0, приуроченная 15 минут
- (2) выберите английский язык для отображения: клавиши дисплей на английском языке, дисплей может быть преобразован в английский или английский.
- (3) выберите режим терапии: нажмите кнопку Выбрать функции для выбора Игло-терапия, ритм. Массаж, кровопускание, Массаж. Гуа Ша, тонкие тела, иммунных регулирование
- (4) отрегулируйте интенсивность. нажмите клавишу регулировки интенсивности, приспособиться к соответствующей прочности
- (5) таймера выберите: выберите минут, каждый дополнительные 5 минут

**Примечания:**

- (1) Если вам нужно использовать снова, пожалуйста, нажмите кнопку только еще раз, повторите описанные выше шаги
- (2) физической терапии на пути, если вы хотите изменить режим физической терапии, интенсивность автоматически уменьшается до 0, в этот момент можно скорректировать fit прочности
- (3) в физической терапии путь если вы хотите изменить физическое частей. а именно положение электрода, вам следует сначала нажмите на клавишу, shutting down снова после выше шаги
- (4) Если остановлена физической терапии, сначала нажмите кнопку open, после питания, а затем удалить электродов
- (5) снять электрод от хоста. пожалуйста, тянуть вилку частей, не тяните
- (6) не используется для длительного времени, батареи должны быть удалены

**3. продукт техническое обслуживание и хранение**

- (1) чистый хост: протрите мягкой тканью, не используйте растворитель, бензин или другие легко испаряющиеся жидкости.
- (2) Очистить электроды: Электроды руб грязи на влажной ткани или промойте водой после высыхания может быть повторно использован немедленно.
- (3) депозит: инструмент помещается где дети не могут получить, вдали от влаги, тепла, прямых солнечных лучей и воды брызг и других местах.

**4. Безопасность соображения:**



Не используйте с следующие медицинские устройства



- (1) использует темпы make и тело похоронили в медицинский электронный инструмент
- (2) с использованием искусственных легких или кардиостимулятор и продлить жизнь медицинских электронных приборов
- (3) с помощью ЭКГ оборудования и носить медицинский электронный инструмент

Если они используют более медицинский электронный инструмент является возможной опасности, вызванной неправильно операции.

Где следующие обстоятельства должны использоваться с осторожностью

- (1) злокачественные опухоли
- (2) эмоциональных расстройств
- (3) во время менструации и беременности женщин
- (4) болезнь сердца не могут быть размещены близко к сердцу
- (5) температура выше 38 градусов
- (6) ненормальной кожи чувствительную
- (7) в следующих частях человеческого тела: внутри рта, глаз, кожи и промежности травма пострадавших район, пожалуйста не используйте ФЭОД/ИТ
- (8) делать не в физической терапии оборудование или линимента используется

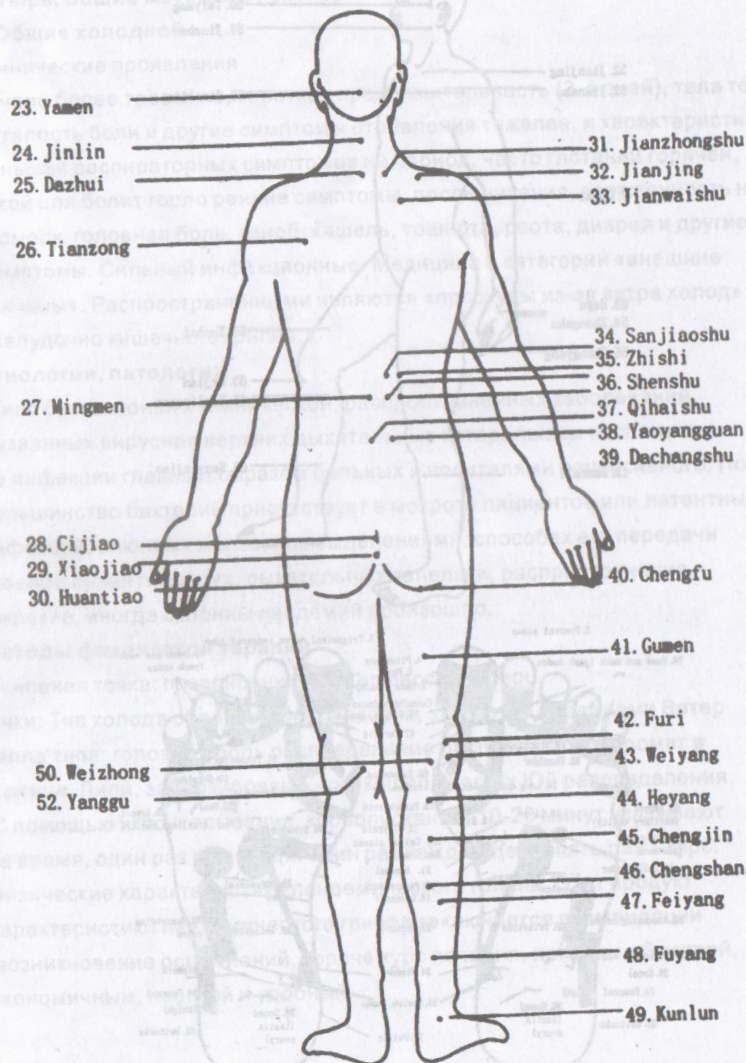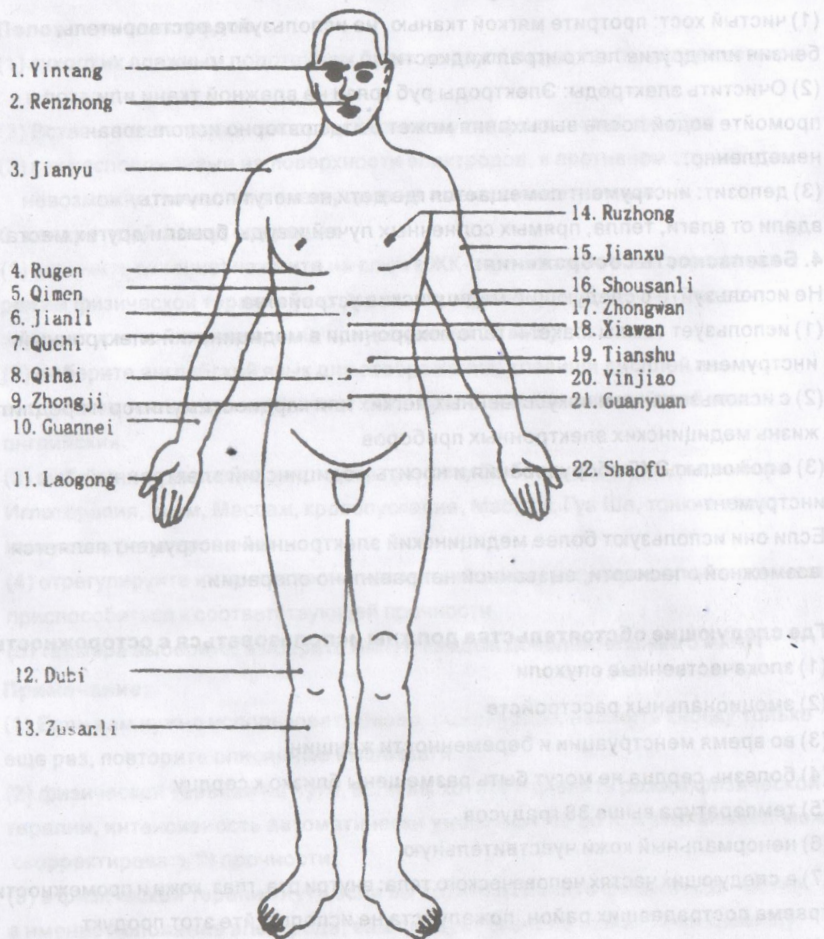

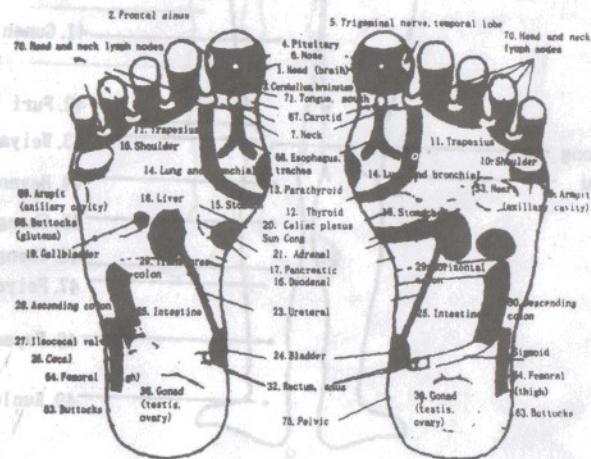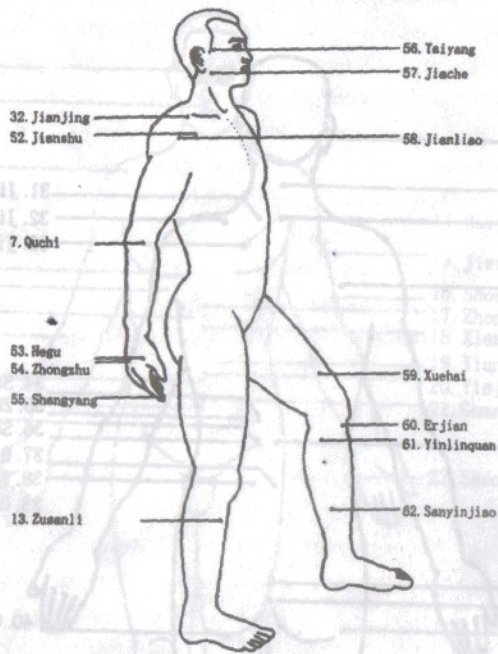

Четыре, общие методы физиотерапии точки боли

1. Общие холодной

Клинические проявления

Начало более тревожно, короткая продолжительность (3-4 дней), температура тела, усталость боли и другие симптомы отравления. Тяжелее, и характеристики меньше респираторных симптомов на период, часто мотание, сухой и болит горло ранние симптомы, после чихания, заложенность носа, насморк, головная боль, озноб, хриплость, рвота, диарея и другие симптомы. Сильный инфекционный. Медицина в категории «внешние»

«распространенными явлениями являются «проглотить из-за ветра холод» «желудок и кишечника гриппа»

Эмоции, патологии

Грипп был склонен к клинической, распространенных заболеваний,

вызванных вирусом верхних дыхательных катаральным воспаления.

Ее инфекции главным образом больных и носителями реинфицированного. По сравнению с бактериями присутствуют в мокроте пациентов или латентных инфекций, слюнных желез, нос выделениями, способах его передачи главной принять воздух, дыхательных капельки, распространения, широкие, иногда спондиль пандемий произошло.



Методы физической терапии

Основная точка: лозовочника, ветер бассейна, и

Очки: Тип холода образований с клапанами, закрыл за пределами ветер тепла типа; головная боль распределение распределения арматура в солнце, Лили, заблокированы нос, кашель легких Юй распределения.

С помощью иглоукачивания, кровопускание, 10-20 минут /квзвввввв

На время, один раз в день или один раз каждый день, пять раз в курс. Физические характеристики пандемического гриппа. Этот продукт характеристики пандемического гриппа заключается в фиксации возникновения осложнений, короткое лечение, привели к быстрой, экономичным, простой и удобный.

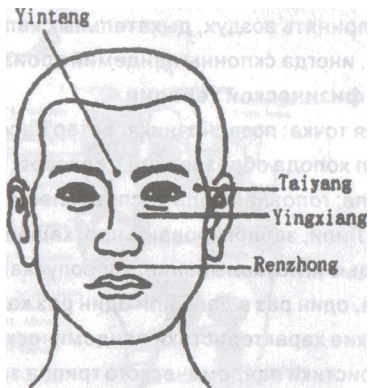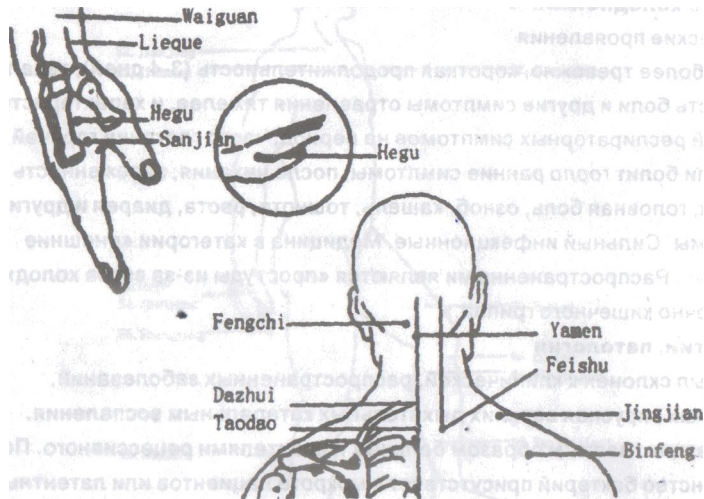

## 2, жвляюка

Острый гастрит и желудка боль: патогенез пик, на верхней брюшной боль и симптомы, грудной полости заполнены с душно расстройства, тошнота, рвота, часто сопровождается лихорадкой, вздутие живота, диарея и других

Хронический гастрит с боли в животв: большинство из патогенеза медленно, главным образом характеризовался тупая боль, отек и боль, эпигастрии жжение иногда, часто после еды холодные предметы на чувство симпТОМы при отягчающих обстоятельствах или брюшной растяжение, анорексия, истощение, Пале, стiабос ь конечностей и других симптомов.

Язвенная болезнь желудка боль: регулярность боль в еерхней конечности, а ииенно оказанив цикi атаки, атаки 1-2 в течение часа после еды, боли в целом ослабла послв еды. Язва желудка в верхней левой боли в животе, язвы двенадцатиперстной кишки в верхней левой брюшной нежности, двенадцатиперстной кишки в верхней левой боли в животе


Этиологии, патологии

Боль в жисоте также науывается «heartburn», «Ожогом сердца», «желудка боль» выше живота рядом где желудка боль как атрибут, является более распространенным в заболеваниях ЖКТ. Боль в желудке происходит т главным образом с ощущением холодных патогена, не фестиваль, голодный достаточно, чтобы не дивта. эмоциональные факторы, такие как бедные, устал чрезмерно.

Китайская медицина считает, что желудок и селезенка таблицами, отношения между селезенки и пвчени взаимных ограничений. Таким образом связанные с желудка, печени, селезенки, желудка боль. Из-за chill out зло, зло, совершенные желудка; или чрезмерное потребление холодной пищи. холодной депозит; или пряный сладкий fat или беспокоить о раздражение газа блок, трудно сделать желудка; или устал от чрезмерной селезенки, средних Коксоаые прииеняется в результате дефицита холодная желудка. Методы физической терапии

Основная точка: желудок, селезенка, ю ю

Очки: zusanli, zhongwan, дверь на сцену. Применение Иглоукальвания терапия. один-два раза в день, каждая точка в то время от 15 минут до 30 мин/7, 8 раз за курс.

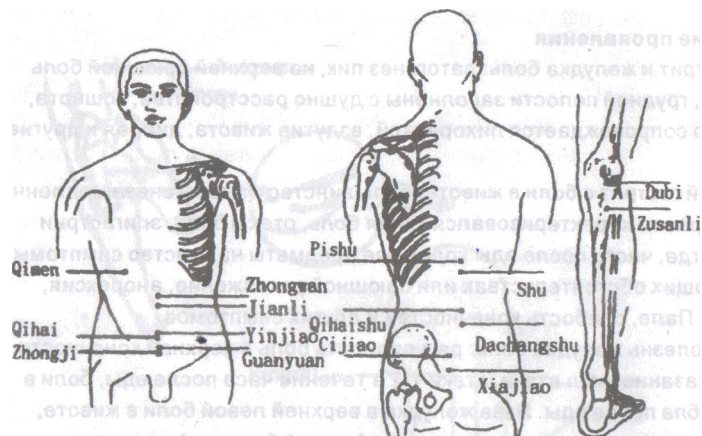

## 3, запор

Клинические проявления

Запор в медицине делится в холодный и горячий секретарь, секретарь, виртуальный секретарь секретарь из четырех типов. Благодаря телу гиперактивность Ян, пища пряная удобрения Ган, меньше пища растительное, Янмин продукт горячей, стула, сушка, Фу, газ не проходят, был в горячей секрет; Любимые рекорды не Чонг, гепатобилиарной газа машина блок, привели к кишечной Фу проводимости не Чонг и в газовых секрет; болезнь Хоу, послеродовой кровь не сложен, Ци является транзитным, не в состоянии, дефицит является кишечных потеряли запуска с и в виртуальных тайну; старого человека Цзяо Ян Ци бдительность, проникнуты не может быть право, Инь холодной конденсации, нельзя ткани Тяньцзинь, для холодной секрет.

Этиологии, патологии

Запор запор отключен, двифкация временной интервал для расширения, или не расширена но дефекации трудности, является 9 более распространяемым а современным мвдичине анальной геморрой ректальной воспаления и кишечные невроз, Анальный




Запоры вызванные кишечных расстройств, таких как лекарственно индуированные запор. Клинические функциональные и органические можно разделить на два класса. Функциональный запор двифекции власть ослабевает, недостаток влаги, вызванных едят слишком мало продовольствия и отсутствие волокна; органические заболевания частично находится вне кишечной непроходимости. кишечных заболеваний вызванных непроходимост кишечника и аноэктальной вастоойств и Helicobacter pylori.

Методы физической терапии

Основная точка: селезенки, Колон, по словам море, ю ю zusanli

1 раз в день, каждая точка в то время на 15 минут, 8 - 10 раз для курса есть

больше овощей, фруктов и за соответствующим мероприятием на свежем воздухе, развивать привычку ежедневно дефекации.

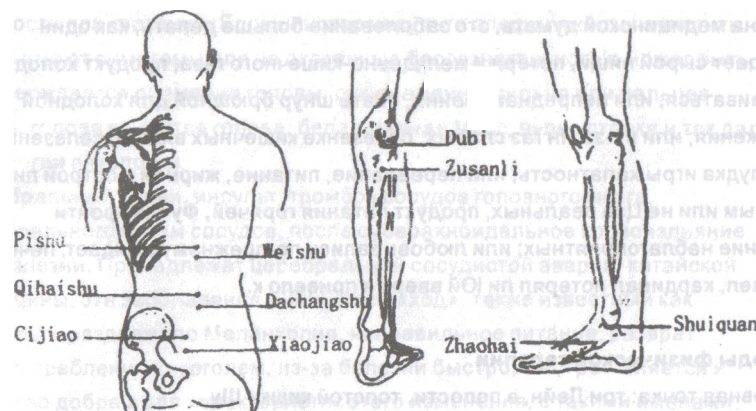



### Клинические проявления

Боль в животе является общим симптомом многих заболеваний, таких, как острый гастроэнтерит, аппендицит, холецистит, желчекаменная, панкреатит, желудка и двенадцатиперстной кишки, дизентерии, кишечной непроходимости, гломерулонефрит, мочеточника исчислений. Разным причинам части природы и характеристик боли в животе, также имеют различные характеристики. Поэтому на момент диагностики, чтобы видеть суть болезни через абдоминальные боли, лечение необходимо определить причины причин боли в животе, в зависимости от симптомов, учитывая различные виды лечения.

### Этиологии, патологии


Боль в животе является желудка, боль в области лобковых волос, где органические заболевания или расстройства из брюшной полости и больших нерва, дыхание, кровообращение, мочеполовой системы, может привести к боли в животе, иногда некоторые системные заболевания также могут вызвать боли в животе.

Родина медицинской *румай*, это заболевание больше делать, как один угождает сырой пищи, потери и желудочно-кишечного газа, продукт холодной застывать; или непреднамеренно, спать шнур брюшной для холодной вторжения; или из-за Ян газ слабых, селезенке кишечных вялым, селезенки и желудка игры халатность; или переизбыток, питание, жирной и острой пищи острым или из Цзе реальных, продукт питания горячей, Фу газ пройти падение неблагоприятных; или любовь записи по-прежнему ожидаеУ, печень Ци узел, кардинал потерял ли Юй вверх и привело к.

### Методы физической терапии

Основная точка: три Лейн, в полости, толстой кишки Шу

Рассматривать раз в день, каждые 10-15 минут на точку, 8 раз за курс

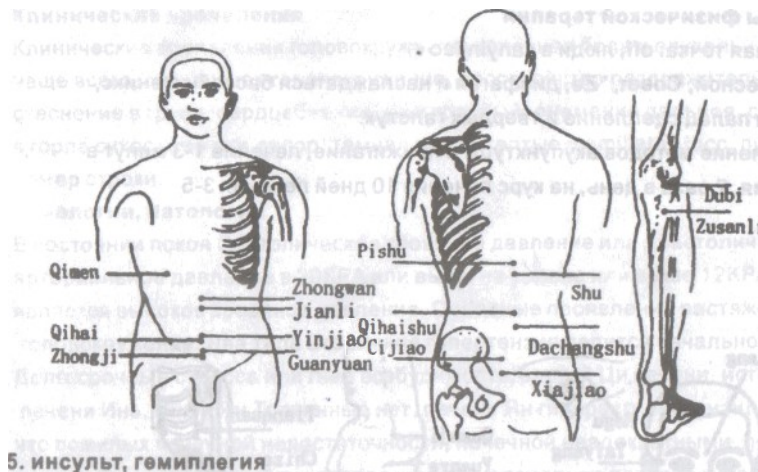

### 5. инсульт, гемиплегия

#### Клинические проявления

Тяжелых инсульта: внезапное кома, некоторые путают, бессознательного, храп дыхание, паралич лицевого нерва. Гроши как главного героя. Мягкий ход: VGH, паралич лицевого нерва, онемение слюноотделение, трудности при глотании. Большинство инсульта следы тяжелых очистить. Также имеют симптомы для не оказанные бессознательного и может быть сопровождается охемение головы, рук онеимение, сильно или пальцев дрожь, голова кружится голова, белая жирная Мосс, пульс строка и так далве. Патологии патологии

Церебральной крови, инсульт, тромбоз сосудов головного мозга, церебрального спазм сосудов, после субарахноидальных кровоизлияние или болезни. Принадлежат церебральной сосудистой аварии, китайской ивдицины, эти заболевания именуемые «ход», также известный как «инсульт» раздражало Меланхолия, неправильное питание, разврат злоупотребления алкоголем, из-за болезни быстро, быстро меняется и характер добра и зла характеристик этого изменения, с такими имвнвми, как инсульт древних. Современная медицина и давления в кроаоизлияние с церебросаскулярные болезни и ишемической церебральной сосудистой болезни.




§ggzgyr физической терапии

основна<sup>я</sup> точка: off, люди в sanyinjiao

очки: весной, Совет, ' Зв. дисфагия и наслаждаться бассейн Феникс,  
Долина палец<sub>c</sub> цепление и твердых галстук,

Применение методов акупунктуры и прижигание, лечение 1-3 минут в  
то время, 2 раза в день, на курс лечения 10 дней лечения 3-5

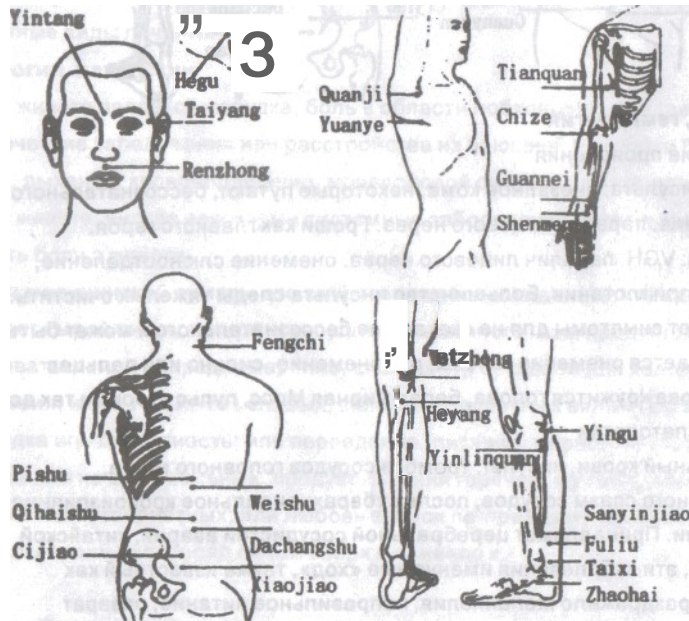

6, гипертвнзия

Клиничвские проявления

Клинические проявления головокружение, головная боль и опухоль  
чаще всего, шум в ушах головокружение, расстройство раздражительность,  
стеснение в груди, сердцебиение, уши кжасный, онемение пальцев, сухость  
в горле сухость во рту, запор, темная моча, желтые mamillata Мосс, пульс  
номер строки.

Этиологии, патологии

В состоянии покоя Систолическое кровяное давление или диастолическое  
артериальное Давление в 20КРА или выше на уровне или выше 12КРА,  
является высокое кровяное давление. Основные проявления растяжения и  
головокружение. Два типа Вторичная гипертензия делится начальной.  
Долгосрочные стресса или гнев возбудимость, застой Ци печени, иотощение  
печени Инь, Йинь и Ян Травянные нет. печень Ян гиперактивности; или потому  
что пожилых почечной недоста<sub>т</sub>очности, почечной неадекватными, печени,


печень Иня с вторичный гиперпаратиреоз; чрезмерное потребление  
удобрений является сладким или чрезмерного Питья, индуцированной  
мокроты, долго а горячие, горения, Тяньцзинь и мокроты, слизи, Luo Инь,  
вызванных этим заболеванием

Методы физической тварапии

Основная точка: quchi

Очки: Baihui, fengchi, плечо

Применение акупунктуры и прижигание, Массаж методы. Около 5-6 минут в  
отверстие, один раз в день, 15 для одного лекарства, лечение за три  
месяца подряд..

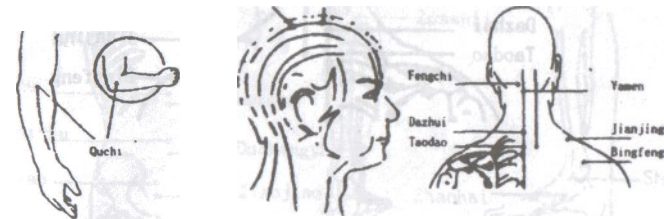



Погружение на, пустые неприятие и боль также из-за слизи сырости  
 опрот'вление, селезенке и потерять, игры или перенапряжение травм и

Он Цин Ци не может поднять и головную болв.


Методы физической терапии

Осьговная точка: бассейн ветер, солнце

Очки: hegu

Применение иглоук алывания и прижигание лечения, взять Ветер бассейн  
 и Храм, вообще принимают Ветер пул, слева » справа храм и наоборот, и  
 принимая hegu асuroint

Около 5-10 минут в отверстие , семь раз за один курс, ежедневно или через день.

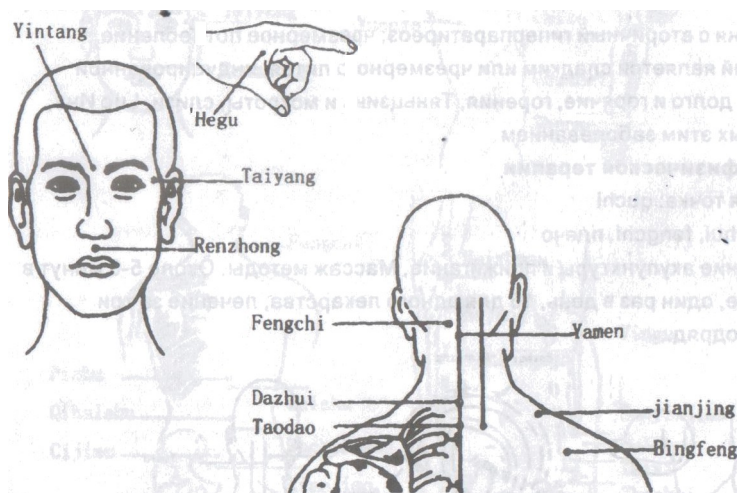

елиническиб пдолвлг ния

Типичные а, т ит клин ических проявлений: множественной миеломы,

симметрии, бродил, многочисленные нарушение крупны х суставов  
 конечностей, листья не характеристиками деформации костей.

Не свойственны только совместные боли, нарушеии аспекта суставов  
 или ограничивается одной совместной, болезнь является более  
 распространенным в традиционной китайской ме/ицине «артралгии».

#### Этиопогии, патологии

Ревматических суставов является нарушением ненормальный  
 соединительной ткани заболеваний суставов.


#### Методы физической тврации

Основные моменты: (1) глаз колена, Ян Лин Quan, фамилия (2) недостаток  
 моря и холмов, Куньлунь

Очки: В1 увеличивается, кровь, tongbi плюс ASHI точки, би и zusanli,

Инь-Лин Спрингс, горячие bi и sanyinjiao; и продолжительной болезни  
 больные и shenshu, ворота жизни.

Применение иглоукальвания и прижигание терапии, каждый точеч в 30  
 минут, 1 раз в день, в 10 раз за 1 курс, не после 5 дней отдыха, то линии  
 второго курса лечения.

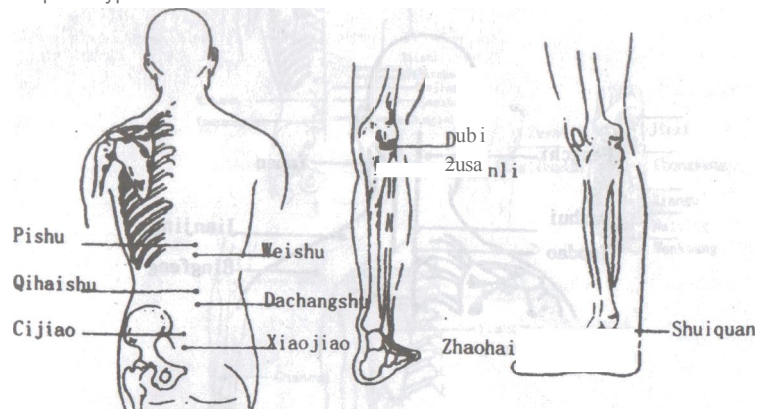



### 9, ригидность затылочных мышцы

#### Клинические проявления

**Основные клинические проявления были боли и дисфункции, современная медицина шейное напряжение мышц шеи, шейное воспаление фиброзной ткани, мышечного ревматизма и цервикальной гипертрофии из-за кривошея, может относиться к этому лечению.**

#### Этиологии, патологии


**Ригидность затылочных мышц относится к верхней части острой простой шейной боли, состояние ограничений деятельности. часть во время сна длительным образом, запустите заблокированы артерии крови, или из-за холодной нападения лица обратно, свертываемость крови, застоя и Меридиан Не имеет никакого смысла**

#### Методы физической терапии

##### Основная точка: точка ASHI

**Очки: Ветер бассейн плечо хорошо**

**Применение акупунктуры и прижигание, кровопускание, занять место, замесить с пятки руки в Аши точки на мгновение, а затем и обращения 10-20 минут, один раз в день.**

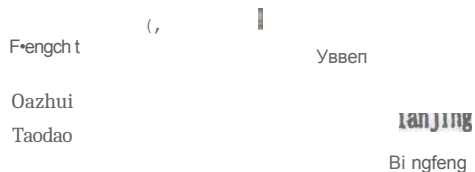

Клинические проявления

Основные клинические проявления. такие, как отеки, пожелтение, жжение и боль. Часть боль может распространяться по всему телу. плечи назад, ноги, руки и ноги и других частей Департамента.

Этиологии, патологии


Боли являются из-за различных причин свинца боли как основных симптомов синдрома, включая острые и хронические воспаления, вызванного болью, нейропатическую боль и рака боль.

Методы физической терапии

Основная точка: Аши точки (то есть. плохо)

Очки: плеча шей, плеч Шу. выборка dazhui; верхнюю конечность для ятого  
Осы получить плечи вне хорошо, песня бассейн, heg u, выкл. ворота жизни от талии, почек, Колон, ю ю Чжи; нижней конечности принять три года, Ян Лин

**Жить раз, когда вы получаете 2-3 балла, с молотка или массаж. Боль лечение, силу немедленно.**

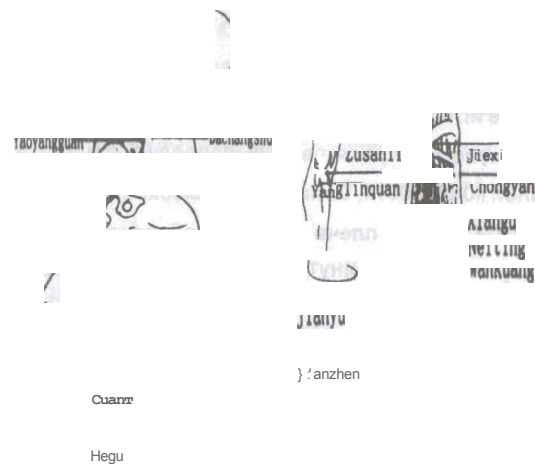



## 11, ПЕРИАРТРИТ

Болезнь начала медленно, ранние плечевые ПЕРИАРТРИТЫ продолжал болезненности, местные широко нежность, может повлиять на плечи из-за плеч боли у больных с активным, такие как Лифт, swing, обратно расширение, расчесывать мои волосы. Это традиционной китайской медицины «конденсации плечи» «замороженное плечо», «50 плвчи» и другие

### Этиологии, патологии

Сестра ПЕРИАРТРИТ плеча мягкой сплетенные хронических дегенеративных заболева ний, в в возрасте около 50 человек, также называемые «50 плечи». Происходящие с возраста, физической пригодности, усталость, имеют тесные отношения. Плохой циркуляции крови плечевого сустава, совместных


капсулу и мягких тканей вокруг суставов и хронической воспалительной рвакиии, ведущие к обширных спаек вокруг плечевого сустава, ограничение нормальной деятельности ппечевого сустаса. Методы физической терапии

Основная точка: плечо

Очки: слабые и zusanli

Применение иглоукалывания и прижигание терапии. Лечение контралатеральной плеча глупо 5 минут во-первых, попросить пациента Kamihira, подними те пораженной конечности, от низкой до высокой активности медлвно. Затем

в физической терапии плеча Шу, чтобы обратно свою деятельность вплоть до максимума, около 5 минут, последний вне шней плечо Шу 5 минут, запретил ее деятельности вперед, повернуть вовнутрь. Лечение 3 очка около 15 минут. Выше методы физиотерапии, раз в день шесть раз на курс.

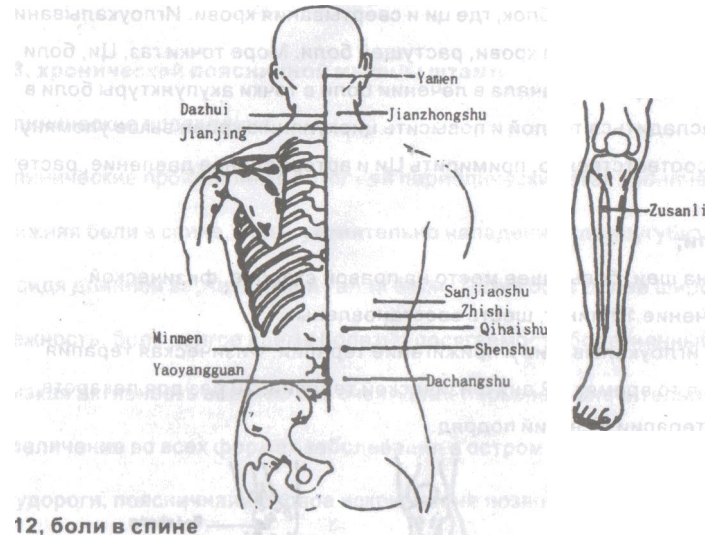

## 12, боли в спине

Этиологии, патотиопи

Нижней части спины боль является симпт омом, которая является общей для многих заболева ний, это не имя одной болез ни или категория, то есть, нет никакой четкой истории травмы, или поеле острой травмы вторичные хроничес' ие травмы. Длительное сутулую осанка или когда на работу или работать в особое положение, болезни или ослабленный штамм поясничных мышц. Или из-за структ урных дефектов, пов еж ения о рганизаций были не в состоании ремонта. Традиционная китайская медицина является также «боль в спине»

Методы лечения:

Основная точка: ASH1 (когда тело не применяется).

Очки. в холод и сырость в стазис типа, кровь, воздуха, влаги и моря: Кхин сдерживать тип слизи. крови, воздуха и моря в zusanli; в жаркий и влажный место ставки оснащвны водой; тратить распределения газа под морем и крови: клапан, кровь и море Ци. застоя и крови застоя.




ASHI асuрpoint меридианов блок, где ци и свертывания крови. Иглоукальвание Ци и активация циркуляию крови, растущей боли. Мореп точки газ, Ци, боли

точек, сыворотка крови, сначала в лечении боли в точки акупунктуры боли в пояснице, насладит вся теплой и повьисить циркуляцию крови выше упомянутых пунктов соответственно, примирить Ци и артериальное давление, растет сила боли;

Швйные боли;

Левая сторона шеи; боль в шее место на правой стороне, физической терапии в течение 10 минут, шесть восстановлены.

Применение иглсугаьвания и прижигание терапии. Физическая терапия все 60 минут в то время, 1-2 дия физической терапии, 10 раз для лекарств, физической терапии 5 сессий подряд.

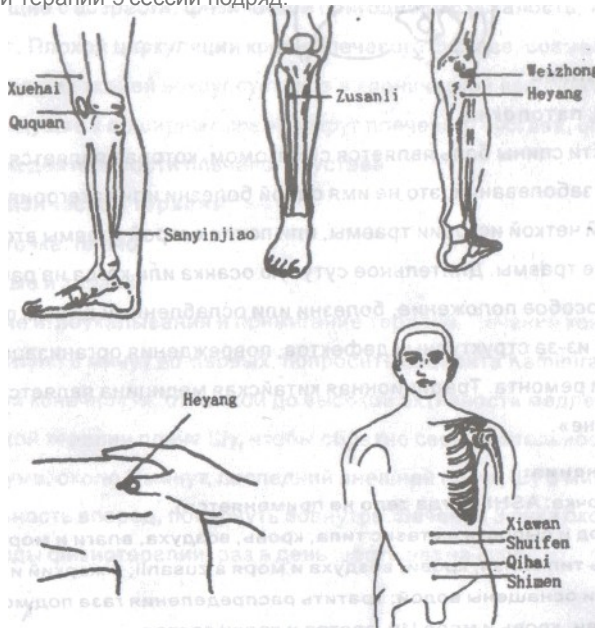

### 13. хронической поясничной мышцты штамм

клинические проявления

Кпнические проявления с историей периодических атак хронического

Нижняя боли в спине, боль, утомительно нападения или усугубить, наклонился и сидя длинной вертикальной талии боли. Талия боль более широко, нет нежность, боль долгое время бопазни досягаемости бобезненных уплотнения, низкая активность обратно без очевидных барьеров. Значительное увеличение во всех формах заболевания в остром эпизоде и могут быть

судороги, поясничнвя Боковое искривление позвоночника, нижних конечностей, содержит боль и другив симптомы.

йтиоогин, пвтологnw

Длинные талии неоднократно напряженными, или травмы острой поясничной мышцы не был для терапии или лечения не является полным своевременно, ила повторяется травм, холод от холода или талии, вызванных мокрый мокрый твлии мышечных волокон причиной хронического воспаления.

Иетоды физической терапии

Основная точка: твлии ASHI точке основная точка: (ппохо)

Очки: ehenshu, премьер-мииастр ю дверь, толстой кишки, средних точкой.

Иглоуквлывние, Массаа терапии. Один раз в день, каждые 5-10 манут на точку, семь раз для курсв.



## 14, синдром шейного отдела позвоночника

## Клинические проявления


Болезнь у людей среднего возраста для просмотра. Растяжение над  
исцеления болезни, света, когда тяжелые, симптомы у шеи и плеча боли,  
онемение верхних конечностей, шеи деятельности под угрозой.  
Сцепление ослаблен, часто ригидность затылочных мышц, мышечная  
атрофия. X-ray и КТ рентгенография может быть подтверждено и ее конкретных  
проявлениях согласно поражения сайта сжатие

Варьируются в зависимости от Оорганизации и тяжести. Разделить нервных  
корешков спинной мозга, позвоночной артерии тип и тип симпатических  
нервов, d-type.

Между различными типами симптома часто смешиваются друг с другом.

Эта болезнь принадлежит к традиционной китайской медицине

«полиомиелита», «Свиц»

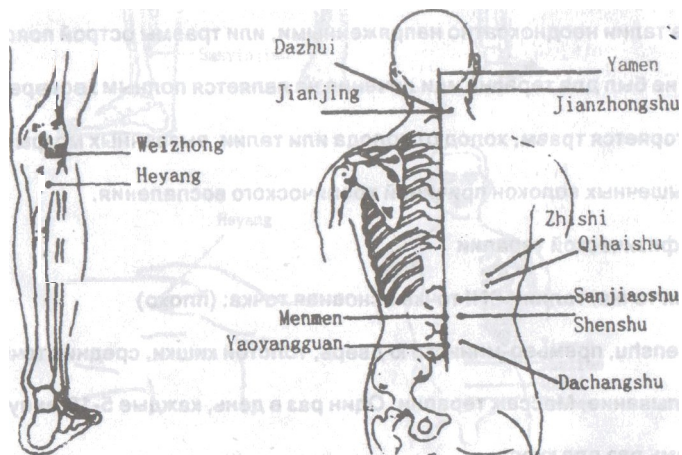

## Этиологии, пвгологмм

Шейки матки синдром, также известный как шейки матки спондилез, шейки  
матки шейки диск, индуцированных долгосрочных травм и других причин,  
а также шейного


С прогрессивной дегенеративных заболеваний (таких как пролиферативной  
воспалительных шейки матки, межпозвѣночных) нерва корня и спинного мозга  
В связи с односторонней или двухсторонней верхней конечности или всех  
чувство, моторные дисфункции, питательных, дистальной слабость  
очевидной синдромы.

## Методы физической терапии

Основная точка: ASHI очков (плохо)

Очки: дней, применяя купирования терапии плечо хорошо. Каждые 3-5 дней,  
20-25 минут в то время, с учетом их соответствующих условий,  
Лечение боли облегчить расценил это определенное количество раз  
вследствие недостаточности печени и почек, за пределами вызванных ветер,  
холод и сырость. Это заболевание возникает в ДУ,  
И Ян ду, недостаточность функции печени и почек, Вэй Ян не является твердой,  
ветра, холода и сырости, создавая запись, что приводит к потере хрови, бег,  
блокирование каналов и коллатералей,  
Смотрите шейки матки жестким повышение терапии конечностей атм,  
онемение tongbi, в тяжелых случаях, мягкие ноги свищей, придавая форму  
чашки тери

Shenshu “

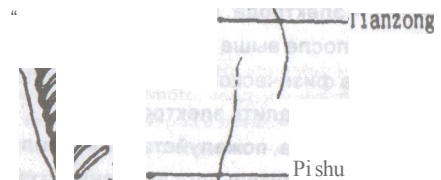



**Аксессуары и техническое обслуживание**

- 1, батарея не является инструментом, который вы хотите использовать и находится на рынке для покупки
- 2, продукт электроды, проволока может быть заменен, торговые центры и розничных торговцев в распределении этого продукта можно приобрести
- 3, хост, если вам нужно обслуживание или запасные части, обратитесь покупателей торговые центры или торговых точек
- 4, если вы приобретаете продукцию на выставках, обращайтесь к местному дистрибьютору, таких, как местные без агентов, mail order напрямую с производителями.
- 5, хосты в год гарантия, обратитесь к гарантийный талон, в рамках других, гарантии или гарантийного обслуживания, только обвинения номинальная плата.

Источник питания	DC3V7 (R03) батареек три
Частота	1-330HZ
Мощность	17MA (сопротивление нагрузки 1K)
Мощность жизнь	При нормальных условиях может быть использован непрерывно для 30 часов
Размер узла	Длина: 153 мм ширина: 70 мм толщина: 28 мм
Вес	90 г
Упаковка	40pcs

**Восемь цифровых Меридиан терапия инструмент качества гарантийный талон**

1. Компания гарантирует пользователям покупать продукцию в спецификациях продукта при нормальном использовании, Если происходит сбой, в течение одного года с даты покупки, запасных частей и обслуживания бесплатно
- 2, более чем через год, такие как часть должна быть заменена, компания обвинения только части, стоимость, обслуживание бесплатно.

Гарантийный период одного года с даты покупки (хост)
Дата покупки: Дата
Адрес пользователя
Имя
Телефон
Дилер
Адрес
Телефон
Имя Марка